



RelaxPlace 2.0

Массажная накидка



Инструкция

Поздравляем с приобретением массажной накидки RelaxPlace 2.0!
Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Содержание

Меры предосторожности	02
Схема и комплектация	05
Особенности	06
Использование	07
Диагностика проблем	08
Уход за массажером	09
Технические параметры	10

Предупреждение

При использовании продукта всегда следует соблюдать все инструкции и основные меры предосторожности:

Опасность! Для снижения риска поражения электрическим током: всегда отключайте массажер от сети, сразу после использования и перед чисткой.

Предупреждение! Для снижения риска ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травмы:

- 1) Никогда не оставляйте массажер без присмотра, если он подключен к электропитанию. Отключите его из розетки, когда вы не используете его или перед сменой насадок.
- 2) Не используйте массажер под одеялом или подушкой. Чрезмерное нагревание может привести к возникновению травм или быть причиной поражения электрическим током.
- 3) Никогда не эксплуатируйте массажер с заблокированными воздушными отверстиями.
- 4) Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в любое отверстие массажера.
- 5) Не используйте на открытом воздухе.
- 6) Не используйте там, где используются аэрозольные (распылительные) продукты или где есть повышенное содержание кислорода.
- 7) Не забудьте вытащить вилку из розетки, когда вы завершили массаж. Не включайте массажер мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током и травмам.
- 8) Не носите массажер за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- 9) Держите шнур подальше от горячих поверхностей. Если неисправность обнаружена, немедленно прекратите использование и отключите массажер от источника питания.
Во избежание несчастных случаев или травм. Пожалуйста, не ремонтируйте массажер самостоятельно, обратитесь в наш сервисный центр.
- 10) Выньте вилку из розетки сразу же после отключения питания. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.

11) Никогда не эксплуатируйте массажер, если он имеет повреждения шнура или вилки, если он не работает должным образом, если он был поврежден, или упал в воду. Обратитесь в сервисный центр.

12) Обращайте внимание на компоненты наиболее восприимчивым к износу, мы советуем вам заменить дефектные компоненты немедленно и / или не использовать массажер до ремонта.

13) Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.

14) Массажер должен использоваться только с блоком питания, входящим в комплект.

15) Массажер можно использовать детям в возрасте от 8 лет и старше, людям с ограниченными физическими и умственными способностями. При отсутствии опыта и знаний, только под наблюдением или при получении детальных инструкции по безопасности использованию массажёра.

* Дети, не должны играть с прибором.

* Уборка, очистка, обслуживание или ремонт не должен производиться детьми.

*** Если вы почувствовали себя плохо во время массажа, то пожалуйста остановите массаж и проконсультируйтесь с врачом. В противном случае это может быть вредно для здоровья.**

1) Людям, с повышенной восприимчивостью к электромагнитным полям, кардиостимуляторами и имплантатами.

2) Людям с пониженной чувствительностью к высоким температурам.

3) Людям с злокачественными опухолями.

4) Людям с сердечными заболеваниями.

5) Во время беременности и после родов.

6) С искривлением позвоночника.

7) Людям страдающим сахарным диабетом, заболеваниями крови, с высоким артериальным давлением.

8) С шрамами.

9) В случае плохого самочувствия.

10) Людям с остеопорозом, с переломами, растяжениями, болями в мышцах и.т.д. с острой головной болью.

11) С температурой тела 38°C и выше.

12) При сильной усталости; ознобе; изменении артериального давления; в период стресса.

13) Людям с тендонитом.

14) Любые другие заболевания требующие прохождения в медицинских учреждениях.



Массажер не предназначен для использования в коммерческих или медицинских целях. В случае если у Вас имеются проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием массажёра



Использовать только в помещении!



Не используйте устройство во влажных помещениях (например, при принятии ванны или душа)



• Не мыть! • Не использовать сухую чистку!



Утилизация

Данная маркировка указывает на то, что поколачивающий массажер, не должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить нанесения ущерба окружающей среде или здоровью людей. Следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье). За дополнительной информацией по утилизации Вы можете обратиться в точку продажи.

Внешнее устройство

1. Массаж шеи и головы
2. Массажные ролики
3. Вибрационный двигатель
4. Пульт
5. Блок питания



Характеристики и специфика действия

Массажная накидка RelaxPlace 2.0 выполняет роликовый растирающий массаж спины вдоль позвоночного столба, воздействуя на активные точки.

- Четыре пары массажных роликов двигаются вдоль позвоночного столба, осуществляя растирающий массаж прорабатывая область лопаток, грудной и крестцовый отделы, поясницу.
- Возможность выбора отдельно одной из трех области массажа (вся спина, верхняя или нижняя часть спины).
- Массаж в области воротниковой зоны выполняется отдельными встроенными в массажную накидку двумя парами массажными роликами, которые выполняют растирающий массаж по и против часовой стрелки.
- Есть возможность отрегулировать высоту массажных роликов в области воротниковой зоны, тем самым делая массаж комфортным для людей разного роста.
- Наличие функции прогрева как спины, так и воротниковой зоны.
- В области сидения массажная накидка выполняет вибрационный массаж для стимулирования кровообращения в тазовом отделе.
- Возможность изменения уровня интенсивности вибрационного массажа: низкий, средний, высокий.
- Жесткая спинка массажной накидки даёт возможность разместить её на любом стуле, кресле, диване

Особенности

- Автоматическое и ручное управление.
- 1 автоматическая программа.
- Массаж шейно-воротниковой зоны выполняется при помощи 4-х массажных роликов;
- Массаж спины выполняется при помощи 8-ми массажных роликов;
- Массажная накидка может работать дома, в офисе, а так же в автомобиле.
- Наличие ремней для фиксации массажной подушки к стулу, а также к автомобильному сидению.

Использование

1. Адаптер питания подключается к розетке сетевого напряжения 220 В. Нажмите кнопку **Вкл. / Выкл.** на пульте управления. Для выключения массажера, нажмите ее повторно.

2. **Регулировка массажа шеи. Вверх / Регулировка массажа шеи. Вниз** для того, чтобы поднять или опустить массажные ролики. При опускании кнопки, массажные ролики зафиксируются в этом положении.

3. Кнопка Массаж спины

Массаж спины выше: включиться массаж верхней части спины, нажмите еще раз, чтобы остановить массаж.

Полный массаж спины: полный массаж спины, нажмите еще раз, чтобы остановить массаж.

Массаж спины ниже: массаж нижней части спины, нажмите еще раз, чтобы остановить массаж.

Фиксация массажных роликов: массаж определенной области спины, нажмите еще раз, чтобы остановить.

4. **Таймер:** 5 минут, 10 минут, 20 минут (время массажа будет отображено на экране дисплея)

5. **3 режима вибрация сиденья:** Нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж, затем нажмите еще раз, чтобы изменить режим, нажмите еще раз, чтобы изменить режим на более интенсивный, нажмите еще раз, чтобы остановить вибрацию.

6. Нажмите кнопку **Прогрев** чтобы запустить функцию подогрева для спины и шеи, нажмите еще раз, чтобы остановить.

Диагностика проблем

Проблема	Причина	Устранение неисправностей
Массажная накидка не включается	Выключено питание	Включите питание
	Вилка прибора отключена от эл. розетки	Убедитесь, что питание подключено
	После часа непр. работы, массажеру требуется 15 мин. перерыв.	Подключите питание через 15 минут
Прибор останавливается во время использования.	Массажная накидка работала долгое время, сработала блокировка от перегрева.	Продолжите массаж не ранее чем через 15 минут
	Возможно, попало инородное тело.	Удалите инородное тело
	Слишком сильное давление на массажер	Уберите лишнее давление. через 15 минут, продолжите массаж
Массажная накидка сильно нагревается	Слишком сильное давление на массажер	Уберите лишнее давление. через 15 минут, продолжите массаж
Массажная накидка производит звуки	Так работает массажная каретка массажера	Это нормальный звук работы массажной накидки
Массажная накидка имеет следы задымления	Немедленно прекратите массаж и обратитесь в сервисный центр	

Если у вас все еще есть какие-либо проблемы после использования методов выше, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.


Уход за массажером

Перед очисткой убедитесь, что питание выключено, а вилка питания выдернута из розетки. Пожалуйста, используйте сухую ткань для очистки массажера.

Держите массажную подушку в чистоте и вдали от влажной среды.

Очистите, когда вы чувствуете, что очистка необходима.

- Вытрите грязь тканью, смоченной в мыльной воде, отожмите ткань перед протиранием.
- Не используйте спирт, растворитель для краски, бензин или жидкость для снятия лака. Их использование может привести к повреждению массажера, появлению трещин или изменению цвета компонентов.

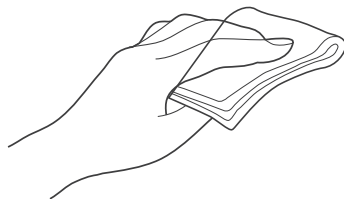

Технологические параметры

Наименование: Массажная накидка

Модель: RelaxPlace 2.0

Напряжение: DC12V

Мощность: 60W

Месяц и год изготовления указаны на
упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в
дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики
изделия в ходе совершенствования своей продукции без
дополнительного уведомления об этих изменениях.

Сделано в Китае.

Производитель: ZHEJIANG YIJIAN ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD
ADD: Room 101, 201, 301, 401, 501, Building 3,
(No.111 Donger Road) High-Tech Small and Micro Park,
Nanbin Street, Ruian, Wenzhou, Zhejiang,China

www.begibey.ru
info@begibey.ru



БЕЙСЯ.

ДВИГАЙСЯ.

ДОБИВАЙСЯ.



Design by Begibe y Russia