



ERGONOVA

Magic Touch Mini **PRO**

перкуSSIONный массажер

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением перкуссионного массажера для тела Ergonova Magic Touch Mini Pro! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться массажером как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ	6
СМЕНА НАСАДОК	6
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	7
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ	7
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	7
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9

Указания по технике безопасности

Опасно! Для снижения риска поражения током, пожара и травм используйте устройство в соответствии со следующими инструкциями.

- Устройство предназначено только для использования совершеннолетними.
- Держите устройство подальше от детей или храните его в недоступных для детей местах.
- Данное устройство не является пищевым продуктом. Пожалуйста, не кладите насадки или какие-либо его части в рот.
- Используйте массажер на мягких участках тела.
- Не используйте прибор для прямого массажа головы, костей и суставов.
- Не используйте массажер на следующих участках: половых органах, лице, глазах, травмированных участках, открытых ранах, ожогах, переломах.
- Используйте массажер на сухой и чистой коже поверх одежды, слегка надавливая и перемещая по телу, задействуя примерно 60 секунд на каждую область.
- В случае боли или дискомфортных ощущений, пожалуйста, немедленно прекратите использование.
- Используйте только насадки, поставляемые в комплекте с массажером, на соответствующие рекомендациям области тела.
- Синяки могут появиться независимо от режима массажа или приложенного давления. Проверьте массируемые участки и немедленно прекращайте использование при первых признаках боли или дискомфорта.
- Во избежание защемления, пожалуйста, держите пальцы, волосы или любые предметы подальше от массажера и задней части насадки.
- Не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия устройства.
- Тщательно проверяйте устройство и аккумулятор перед каждым использованием.
- Не разбирайте самостоятельно устройство.
- Никогда не оставляйте работающее или заряжающееся устройство без присмотра.

Меры предосторожности

- НЕ погружайте массажер в воду. Храните его вдали от источников влажности или тепла. Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия пыли и мусора.
- НЕ откручивайте болты и не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно.
- НЕ используйте устройство непрерывно более одного часа. Дайте ему отдохнуть в течение 30 минут перед повторным включением.
- Отключите зарядное устройство непосредственно после зарядки или перед использованием.
- Устройство предназначено только для использования совершеннолетними. Не используйте массажер в случае получения травмы. Рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Противопоказания


Следующие группы лиц должны проконсультироваться с врачом перед использованием.

Беременность, диабет с осложнениями, такими как невропатия или повреждения сетчатки, наличие кардиостимуляторов, предшествующие недавние госпитализации, эпилепсия или мигрень, грыжи межпозвоночных дисков, спондилолистез, спондилолизис или спондилез, недавняя замена суставов, наличие металлических штифтов или пластин, плохое самочувствие. Использование любого перкуссионного массажера лицами с ограниченным здоровьем или детьми разрешается только в сопровождении взрослого. Вышеописанные противопоказания не запрещают вам пользоваться массажером, однако советуем сначала проконсультироваться с лечащим врачом.

В настоящее время проводятся исследования влияния перкуссионных массажеров на конкретные заболевания и симптомы. Это, вероятно, приведет в будущем к сокращению списка противопоказаний.


Практический опыт показал, что в ряде случаев использование перкуссионных массажеров в качестве дополнения к лечению носит рекомендательный характер. Конечное решение принимает врач, специалист или физиотерапевт.

Комплектация

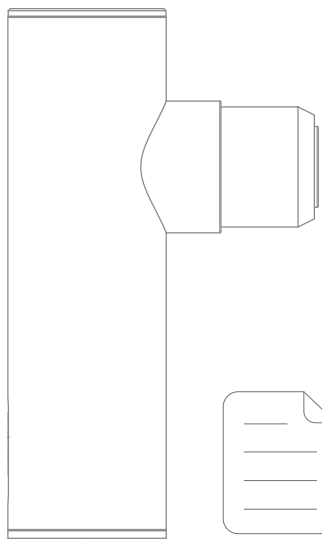


Массажный пистолет


Руководство

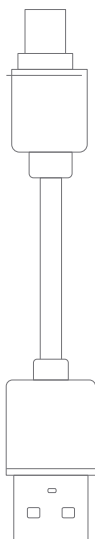


Зарядный кабель
типа USB-C

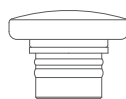


Плоская
насадка

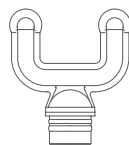

U-образная
насадка

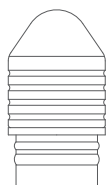


Пулевидная
насадка

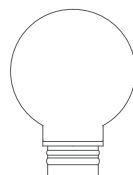

Шарообразная
насадка


Сменная
массажная
насадка

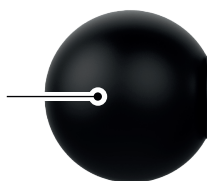


Ручка



Массажные насадки

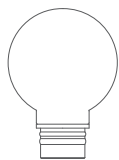


Круглая насадка
Для массажа всего тела,
например, ладоней и стоп.

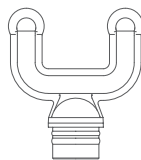

U-образная насадка
Для массажа шеи,
плеч и сухожилий.





Пулевидная насадка
Для работы с акупунктур-
ными точками и глубокими
мышцами.

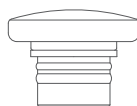

Плоская насадка
Для расслабляющего
и скульптурирующего
массажа.

Смена насадок

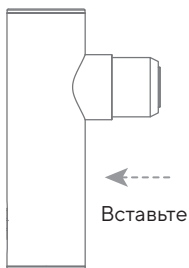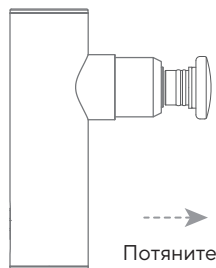


или



или



или

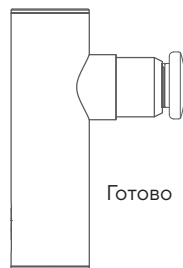

Включение/выключение

- Зажмите кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить массажер.
- Зажмите кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить массажер.

Регулировка скорости

- После включения массажер начнет работать на скорости 1.
- Каждое нажатие на кнопку увеличивает скорость на 1 шаг выше.
- Когда скорость достигнет уровня 3, нажмите на кнопку еще раз, чтобы вернуть скорость к уровню 1.

Внимание:

Во избежание травм связок и мышц, вызванных чрезмерным массажем, устройство оснащено таймером на 10 минут.


Световой индикатор

- Индикатор уровня скорости отражает интенсивность вибрации.
- После включения массажер начнет работать на скорости 1.
- При каждом коротком нажатии скорость будет циклически меняться.

Уровни скорости

1 уровень	2 уровень	3 уровень
1800 об / мин	2600 об /	3200 об

Индикатор
уровня заряда

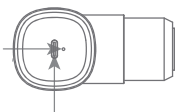

Разъем для зарядки
Красный индикатор горит во время зарядки.
Белый индикатор означает, что устройство полностью заряжено.

Кнопка
питания




Кнопка
скорости



Зарядка устройства

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Во время зарядки индикатор горит красным. Белый индикатор означает, что устройство полностью заряжено.
- Полная зарядка занимает около 3 часов, а время работы после полной зарядки составляет около 8 часов.
- Когда уровень заряда батареи составляет менее 10%, начинает мигать красный индикатор. Для обеспечения нормального использования, пожалуйста, как можно скорее зарядите устройство.
- В целях вашей безопасности не используйте устройство во время зарядки.
- Для обеспечения длительного срока службы, пожалуйста, зарядите устройство как можно скорее, как только замигает красный индикатор уровня заряда.

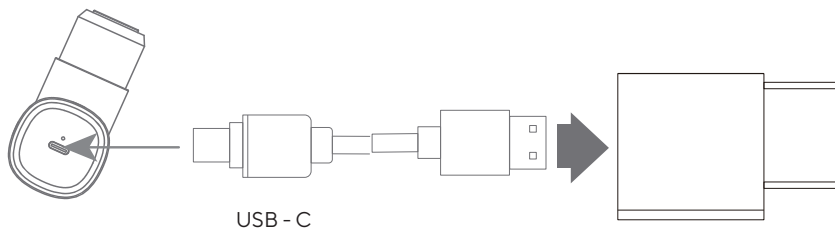

Пользовательский адаптер питания

Примечание: Адаптер питания должен быть 5V / 2A.

Утилизация аккумулятора



Перед утилизацией устройства, пожалуйста, с помощью подходящего инструмента откройте металлическую часть внизу пистолета и выньте находящийся внутри аккумулятор для утилизации (пользователь не может менять аккумулятор самостоятельно):

- Перед утилизацией устройства необходимо извлечь аккумулятор из устройства.
- При извлечении аккумулятора убедитесь, что устройство выключено.
- Аккумулятор следует утилизировать в соответствии с национальными правилами по утилизации и классификацией опасных отходов.

Технические характеристики

Наименование: перкуссионный массажер
Модель: Magic Touch Mini Pro
Номинальная мощность: 16 Вт
Пиковая мощность: 60 Вт
Номинальное напряжение: 8 В
Номинальный ток: 2А
Номинальная частота: 50/60 Гц
Выходное напряжение: 5 В
Выходной ток: 2А
Вес продукта: 390 г
Самая высокая скорость: 3200 об/мин
Емкость аккумулятора: 2000 мАч
Размер изделия: 75x38x130 мм (без насадок)
Источник питания: Заряжаемый литиевый аккумулятор

тел. 8-800-700-14-29
www.ergonova.ru
info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>
Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.
Ergonova GmbH
Все права защищены



Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае



Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

